

Hier eine Anleitung zum Schmieren von ERGO-FIT Laufbändern (3000er und 4000er Serie):


Schmierung der Laufgrundfläche

Spätestens nach Erscheinen der Ölintervallanzeige im Display oder nach Auftreten von Schleifgeräuschen während des Laufens muss der Ölfilm unter dem Laufgurt überprüft werden. Dann muss nach Bedarf nachgeölt und die „Ölintervall-Distanz“ neu eingestellt werden.

Die Intervalle sind je nach Einsatz unterschieden nach:

- ⊗ Krankengymnastik / wenig benutzt, ca. 500 km
- ⊗ Studio / mittlere Benutzung, ca. 1000 km
- ⊗ Studio / starke Belastung, ca. 1500 km

Das Nachölen erfolgt mit der mitgelieferten Flasche Spezialöl und einer 10 ml Spritze. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Spezialöl (Spezialöl erhalten Sie zudem auf Anfrage bei ERGO-FIT)! Andere erhältliche Öle und Fettmittel können den Laufgurt und die Lauffläche beschädigen und somit zum Ausfallen des Laufbandes führen. Für einen Wartungsvorgang benötigen Sie 2 Spritzen à 10 ml Spezialöl.

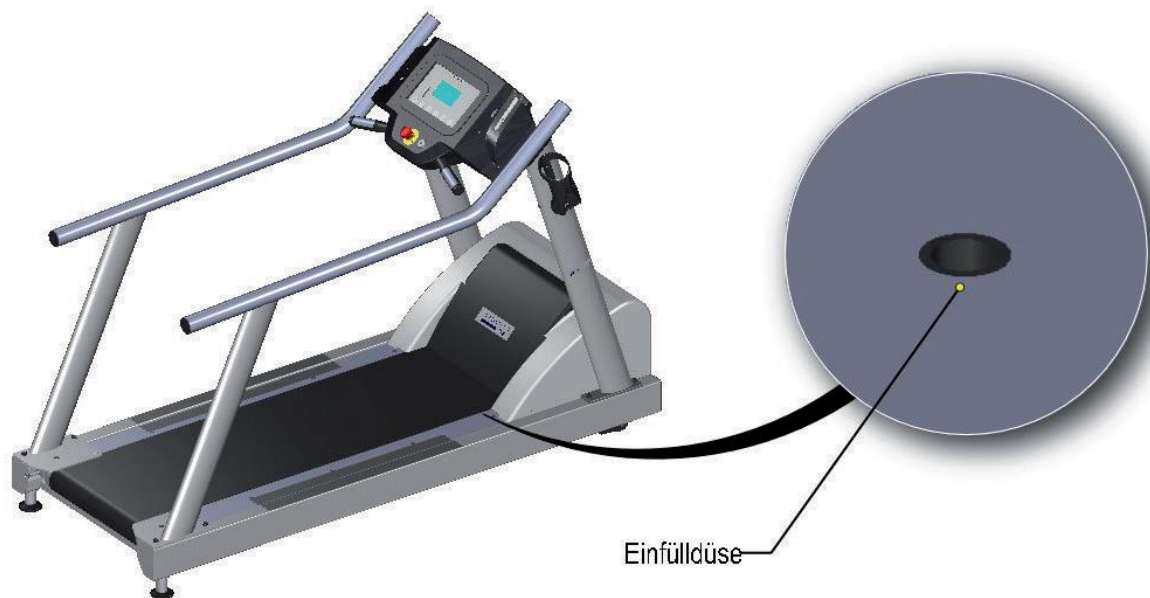

Gehen Sie wie folgt vor:

Achten Sie darauf, dass Sie nicht mit dem Laufgurt in Berührung kommen! Um Ihre Sicherheit gewährleisten zu können, muss dieser Wartungsvorgang stets von einer zweiten Person überwacht werden. Diese Person kann im Notfall den Not-Aus-Schalter betätigen.

1. Schalten Sie das Laufband an und wählen Sie die Betriebsart „MANUELL“. Lassen Sie das Laufband mit einer Geschwindigkeit von ca. 2 km/h laufen.
2. Füllen Sie die mitgelieferte Spritze mit dem Spezialöl.
3. Seitlich unter dem Laufgurt befindet sich ein Brett, in dem sich die Einfülldüse befindet. Führen Sie die Spritze in die Einfülldüse ein und drücken Sie den Inhalt langsam in die Düse.

4. Füllen Sie die Spritze erneut mit Spezialöl und wiederholen Sie den Vorgang gemäß Punkt 3.
5. Anschließend füllen Sie die Spritze mit Luft, um das komplette Öl auf den Laufgurt zu bringen.
6. Lassen Sie das Laufband nach dem Ölen noch ca. 5 min ohne Person mit einer Geschwindigkeit von 5 km/h laufen, damit sich das Öl auf der Laufgurtfläche verteilen kann.
7. Setzen Sie die Anzeige wieder zurück auf die Grundeinstellungen (siehe unten)

Achtung – nicht vergessen – Serviceintervall zurück stellen! Hier die Anleitung:

Einstellung ERGO-FIT 3000er Serie:

Um Änderungen an den Grundeinstellungen vorzunehmen, stehen Ihnen 4 Tasten zur Verfügung:
PLUS-Taste: Sie können sich im Menü bewegen und Einstellungen erhöhen MINUS-Taste: Sie können sich im Menü bewegen und Einstellungen verringern START-Taste: Hiermit bestätigen Sie Ihre Auswahl
STOP-Taste: Hiermit brechen Sie eine Funktion ab oder verlassen ein Menü

CARDIO LINE 3000

Einstellen der Sprache:

Sie befinden sich im Hauptmenü, durch gleichzeitiges Drücken der PLUS- und STOP-Taste gelangen Sie in das Menü "Sprachauswahl". Hier haben Sie die Möglichkeit, die Sprache zu ändern.

Einstellen von Uhrzeit und Datum: Sie befinden sich im Hauptmenü, durch gleichzeitiges Drücken der PLUS- und MINUS-Taste gelangen Sie in das Menü "Uhrzeit und Datum". Hier haben Sie die Möglichkeit, die entsprechenden Änderungen vorzunehmen.

Aufrufen der Serviceeinstellungen (nur TRAC)

Durch **zweimaliges, gleichzeitiges Drücken** der PLUS- und MINUS-Taste gelangen Sie in das Servicemenü (bei 3000 S, bei 3000 nur einmaliges, gleichzeitiges Drücken). Im Servicemenü finden Sie Angaben wie z. B den Gesamtkilometerstand.

Einstellen der Auslaufzeit im Servicemenü (nur TRAC) Sie können die Auslaufzeit von 20 s bis 60 s nach Bedarf einstellen (Zeit von der Maximalgeschwindigkeit bis zum Stillstand des Laufbandes).

Auswahl der Steigungsoption im Servicemenü (nur TRAC)

Auswahl "TOUR JA": Steigung -5% ... +15%

Auswahl "TOUR NEIN": Steigung 0% ... +20%

Auswahl der Ölintervalle im Servicemenü (nur TRAC) Auswahlmöglichkeiten: 1500 km, 1000 km, 500 km, 0 km Bei Auswahl 0 km ist die Ölintervallanzeige deaktiviert. Bei Auswahl 1500/1000/500 km wird bei Erreichen der entsprechenden Distanz im Betriebsmenü rechts neben der Geschwindigkeitsvorgabe das Symbol einer Ölkanne angezeigt. Durch erneute Eingabe eines neuen Intervalls wird der Hinweis wieder zurückgesetzt. Die werksseitige Grundeinstellung ist 1000 km. Während des Ölintervalls kann in diesem Menü die noch verbleibende Distanz (km) bis zum nächsten Ölservice abgelesen werden. Der Vorgabewert (z.B. 1000 km) wird auf "0" zurückgezählt.

Einstellung ERGO-FIT 4000er Serie:

Um Änderungen an den Grundeinstellungen vorzunehmen, stehen Ihnen 4 Tasten zur Verfügung:

- PLUS-Taste: Sie können sich im Menü bewegen und Einstellungen erhöhen
- MINUS-Taste: Sie können sich im Menü bewegen und Einstellungen verringern
- START-Taste: Hiermit bestätigen Sie Ihre Auswahl
- STOP-Taste: Hiermit brechen Sie eine Funktion ab oder verlassen ein Menü

CARDIO LINE 4000

Einstellen der **Sprache**:

Sie befinden sich im Hauptmenü, durch gleichzeitiges Drücken der PLUS- und MINUS-Taste gelangen Sie in das Servicemenü. Wählen Sie nun die Funktion „Sprachauswahl“. Hier haben Sie die Möglichkeit, die Sprache zu ändern.

Einstellen von **Uhrzeit und Datum**:

Sie befinden sich im Hauptmenü, durch gleichzeitiges Drücken der PLUS- und MINUS-Taste gelangen Sie in das Servicemenü. Wählen Sie nun die Funktion „Uhrzeit und Datum“. Hier haben Sie die Möglichkeit, die entsprechenden Änderungen vorzunehmen.

Aufrufen der **Serviceeinstellungen** (nur TRAC)

Sie befinden sich im Hauptmenü, durch gleichzeitiges Drücken der MINUS- und PLUS-Taste gelangen Sie in das Servicemenü. Wählen Sie nun die Funktion „Serviceeinstellungen“. Hier finden Sie Angaben wie z. B den Gesamtkilometerstand. Beachten Sie bitte, dass das Gerät durch einen mehrstündigen Probelauf im Werk bereits einen Kilometerstand aufweisen kann!

Einstellen der **Auslaufzeit** im Servicemenü (nur TRAC)

Sie können die Auslaufzeit von 20 s bis 60 s nach Bedarf einstellen (Zeit von der Maximalgeschwindigkeit bis zum Stillstand des Laufbandes).

Auswahl der Steigungsoption im Servicemenü (nur TRAC)

Auswahl „TOUR JA“: Steigung -5% ... +15%

Auswahl „TOUR NEIN“: Steigung 0% ...+20%

Auswahl der **Ölintervalle** im Servicemenü (nur TRAC)

Auswahlmöglichkeiten: 1500 km, 1000 km, 500 km, 0 km

Bei Auswahl 0 km ist die Ölintervallanzeige deaktiviert. Bei Auswahl 1500/1000/500 km wird bei Erreichen der entsprechenden Distanz im Betriebsmenü rechts neben der Geschwindigkeitsvorgabe das Symbol einer Ölkanne angezeigt. Durch erneute Eingabe eines neuen Intervalls wird der Hinweis wieder zurückgesetzt. Die werksseitige Grundeinstellung ist 1000 km. Während des Ölintervalls kann in diesem Menü die noch verbleibende Distanz (km) bis zum nächsten Ölservice abgelesen werden. Der Vorgabewert (z.B.1000 km) wird auf „0“ zurückgezählt.